


# NITECORE BITE HEALER 10 KEZELÉSI UTASÍTÁS

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!** - Használat előtt olvassa el és értelmezze a kezelési utasítást!

A Nitecore Bite Healer 10 készülék szúnyogcsípések viszkető érzésének csillapítására szolgál.

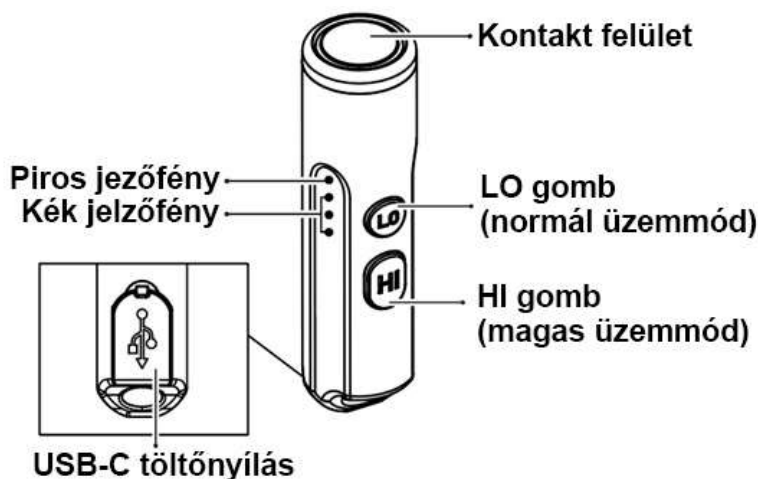

## Töltési funkció

A készülék intelligens töltőrendszerrel van ellátva. Kérjük, az első használat előtt tölts fel a készüléket.

**Áramellátás csatlakoztatása:** Csatlakoztasson egy USB töltőkábelt egy külső áramforráshoz (pl. hálózati adapter, power bank vagy más töltőeszköz), majd a készülék USB-C töltőnyílásához a töltési folyamat elindításához. A töltés során a kék visszajelző fények fokozatosan, villogásból állandó világításba váltva jelennek meg, egyenként jelezve a töltöttségi szintet. Amikor a készülék teljesen feltöltött, mindhárom kék jezőfény folyamatosan világít. A töltési idő körülbelül 1 óra 40 perc (5V=1A adapterrel töltve).

## A Bite Healer 10 használata

A készülék kétféle hőmérséklet beállítással rendelkezik. Kérjük, bőre állapotának és típusának megfelelően válassza ki a megfelelő fokozatot. **LO üzemmód** (normál üzemmód): érzékeny bőrrétek részére. **HI üzemmód** (magas üzemmód): normál bőrrétek részére.

### 1. Gyors viszketéscsillapítás

Tartsa lenyomva a **HI** vagy **LO** gombot bőrtípusának megfelelően kiválasztva, amíg a piros visszajelző fény folyamatosan világítani nem kezd. Ekkor engedje fel a gombot és helyezze a fém érintkezőlapot a csípés helyére. 3 másodperc elteltével a piros visszajelző automatikusan kialszik, jelezve, hogy a készülék kikapcsol.

### 2. Hosszabb ideig tartó viszketéscsillapítás

Tartsa lenyomva a **HI** vagy **LO** gombot bőrtípusának megfelelően kiválasztva. Amikor a piros visszajelző fény folyamatosan világít, ne engedje el a gombot, hanem tartsa lenyomva tovább, amíg a kék visszajelző(k) is világítani nem kezdenek. Ezután engedje fel a gombot, és helyezze a fém érintkezőlapot a csípés helyére.

A készüléken három kék visszajelző található. Minden világító kék fény további egy másodperc hatásidőt jelent.

- Ha 1 kék visszajelző világít: a hatásidő 4 másodperc.
- Ha 2 kék visszajelző világít: a hatásidő 5 másodperc.
- Ha 3 kék visszajelző világít: a hatásidő 6 másodperc (maximális időtartam).

**Megjegyzés:** Ha mindhárom kék visszajelző világít és a gombot továbbra is nyomva tartják, a piros és kék fények egyszerre kialszanak és a készülék automatikusan kikapcsol.

## Töltöttségi szint kijelzése

Nyomja meg röviden a **HI** vagy **LO** gombot: a megfelelő kék visszajelzők egymás után felvillannak, jelezve az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét. 3 folyamatos kék fény: 75% feletti töltöttségi szint. 2 folyamatos kék fény: 35-75% közötti töltöttség. 1 folyamatos kék fény: 5-35% közötti töltöttség. 1 villogó kék fény: 5% alatti töltöttség. Tölts fel az akkumulátort.

## ⚠ FIGYELEM!

- A termék kizárólag  **felnőttek számára készült**, gyermekektől elzárva tartandó.
- Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol az esetleges lenyelés és fulladás elkerülése érdekében.
- A termék kizárólag szúnyogcsípés okozta viszketés enyhítésére szolgál.
- A készüléket csak felnőttek (18 éves kor felett) használhatják. 10 éves kor alatti gyermekek számára nem ajánlott. 10 éves kortól vagy fogyatékkal élő személyek kizárólag szülői vagy gondviselői felügyelettel és segítséggel használhatják.
- **Csecsemőkön és kisgyermeken ne használja a készüléket** az égési sérülések megelőzése érdekében.
- **Ne használja a készüléket bőrbetegségek (pl. ekcéma, stb) vagy extra hőérzékenység esetén.**
- **Ne alkalmazza a készüléket sérült, sebes, gyulladt bőrfelületen, vagy súlyos allergiás reakciót mutató területen**, mert ez súlyosbíthatja a tüneteket vagy fertőzést okozhat.
- **Óvatosan járjon el epilepsziás vagy keloidos hajlamú felhasználóknál** – javasolt először próbahasználat kis bőrfelületen.

## ⚠ FIGYELEM!

- Terhesség esetén használat előtt kérje ki orvosa tanácsát.
- Anyagcsere eredetű érzékelési zavarban szenvedő betegeknél (pl. cukorbetegség, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, pajzsmirigy-zavarok vagy neuroimmun betegségek) a készüléket kizárólag fokozott óvatossággal vagy felügyelettel használható.
- Első használat során javasolt a **normál üzemmód (LO)** alkalmazása egy kisebb, kevésbé érzékeny bőrfelületen, hogy meggyőződjön az esetleges kényelmetlenség vagy allergiás reakció hiányáról. Ha bőrpír, duzzanat vagy más rendellenes tünet jelentkezik, hagyja abba a használatot.
- Használat közben folyamatosan figyelje bőre állapotát. Ha szokatlan tünetek jelentkeznek (pl. erős bőrpír, fokozódó viszketés, égő érzés, allergiás reakció), hagyja abba a használatot, öblítse le az érintett területet vízzel, és szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Ne használja az arc, a szemkörnyék vagy más érzékeny bőrfelületeken.
- Ne használja túl gyakran ugyanazon a bőrfelületen: **óránként legfeljebb 5 alkalommal**, minimum **2 perc szünettel** az egyes alkalmazások között.
- Ne vakarja az érintett bőrfelületet használat közben, hogy elkerülje a további irritációt vagy hámsérüléseket.
- A készülék átmeneti helyi bőrpírt, melegség érzést vagy enyhe csípő érzést okozhat, amely általában néhány percen belül elmúlik.
- A készülék kizárólag emberek számára készült. Ne használja állatokon (pl. kutyán, macskán, stb.).
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyag közelében, mivel a magas hő égést vagy robbanást okozhat.
- A készülék nem helyettesíti az orvosi kezelést. Ha a tünetei nem enyhülnek, kérjen orvosi segítséget.
- Ne merítse vízbe a készüléket. Ha vízbe esik, szárítsa meg alaposan ismételt használat előtt.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a töltőnyílásba, mert az a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ha nem használja, száraz, szobahőmérsékletű helyen tárolja a terméket.
- Ne tegye ki a készüléket tartósan 60 °C feletti hőmérsékletnek, mivel ez az akkumulátor felrobbanását vagy kigyulladását okozhatja.
- Ne tegye vízbe a készüléket, ne használja nedves környezetben!
- **Ne szerelje szét és ne módosítsa** a terméket – ez a jóállás megszűnését eredményezi.
- Ha hosszabb ideig nem használja akkor **6 havonta töltsen fel az akkumulátort!**

## ⚠ Akkumulátor biztonság

**A beépített lítium-ion akkumulátor nem rendeltetésszerű használata károsodáshoz, tűzhez vagy akár robbanáshoz vezethet.**

- Sérült készüléket ne használjon!
- Ne szűrje át, ne vágja el, ne törje össze vagy égesse meg a készüléket!
- Ha szivárgást vagy szokatlan szagot észlel az akkumulátornál azonnal hagyja abba a használatot!
- A terméket és az akkumulátort a helyi szabályozásnak megfelelően veszélyes hulladékként kell kezelni!

## Felelősség kizárása

A forgalmazó és a gyártó nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, veszteségért vagy igényért, amely abból ered, hogy a használati útmutatóban foglaltakat nem tartották be!

## Jótállási feltételek

- Minden hibás vagy rendellenesen működő NITECORE® Nite Healer készülék ingyenesen javítható 24 hónapon belül a vásárlás dátumától számítva.
- A jótállás érvényét veszti, ha:
  - A terméket illetéktelen személy megbontja, átalakítja vagy módosítja.
  - A termék meghibásodása nem rendeltetésszerű használatból ered.
- Jótállási igényét a vásárlás helyén jelentheti be a vásárlás dátumát igazoló számlával, vagy blokkal együtt.

## Karbantartási útmutató:

- Használat után várja meg, míg a készülék teljesen kihűl!
- A készüléken látható szennyeződéseket száraz puha ruhával, pl. mikroszálas kendővel törölje le.
- Ne használjon a tisztításhoz nedves törölkendőt, folyadékokat, oldószereket, tisztítószereket!
- Miután megtisztította száraz, napfénytől védett helyen tárolja szobahőmérsékleten!
- Hosszabb idejű tárolás előtt töltsen fel az akkumulátort teljesen.
- Ha nem használja akkor 6 havonta töltsen fel az akkumulátort!

**Specifikáció:**

Bemenet	USB-C: 5V=1A
Fűtőlap hőmérséklete	LO (normál üzemmód): 45°C ; HI (magas üzemmód): 50°C
Akkumulátor	lítium-ion, 130mAh
Anyaga	műanyag, acél
Mérete	60mm x 16mm x 16mm
Tömeg	12g±2g (Tartozékok nélkül)
Tartozékok	kulcstartó
IP védettség	IP54

A jelen útmutatóban szereplő minden kép, szöveg és állítás tájékoztató célt szolgál. A Smoking Acc. International Kft. fenntartja a jogot a dokumentum tartalmának módosítására előzetes értesítés nélkül.

**Származási hely:** Kína

**Importálja:** Smoking Acc. International Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 131/B **WEB:** [www.smokingacc.hu](http://www.smokingacc.hu) **EMAIL:** info@smokingacc.hu